

ИНСТРУКЦИЯ REVLINE


RL 025 Baby

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ЗВУКОВАЯ
ЗУБНАЯ ЩЕТКА

1-5
ЛЕТ

Поздравляем!

Вы стали обладателем высокотехнологичного устройства, которое позволит детским зубам и деснам быть красивыми и здоровыми. Ежедневное использование зубной щетки значительно снижает риск стоматологических заболеваний. Безопасна для тонкой зубной эмали даже молочных зубов. Рекомендуется для детей в возрасте 1-5 лет.

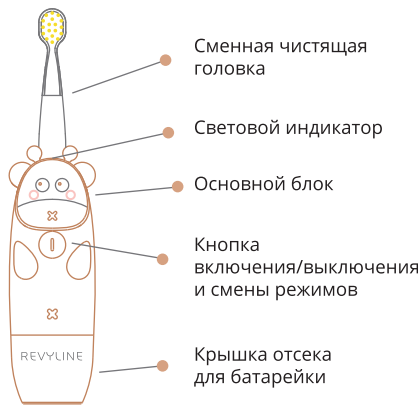

Меры предосторожности

Перед первым применением щетки Revlyne RL 025 Baby внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраните ее.

1. Не погружайте прибор в воду или другую жидкость. Допускается промывание корпуса после использования.
2. Не используйте щетку во время принятия душа.
3. Не храните прибор в местах, откуда он может

упасть в емкость с водой или в раковину.

4. Используйте только фирменные насадки и аксессуары.
5. Если щетка не используется длительное время, рекомендуется вынуть батарейку, положить щетку в коробку и хранить в прохладном месте.
6. Не вставляйте посторонние предметы в гнездо для сменной насадки.
7. Запрещено оставлять прибор работающим в течение длительного времени. Время непрерывной работы не должно составлять более 10-ти минут.
8. Не используйте прибор при наличии ранок в полости рта или на языке.
9. Использование щетки детьми возможно только под присмотром взрослых.
10. Запрещается бегать или ходить во время чистки зубов, когда щетка находится во рту.
11. Электрическую зубную щетку Revlyne RL 025 Baby не рекомендуется использовать лицами (в т.ч. детьми) с ограниченными физическими возможностями, психическими нарушениями и отсутствием опыта использования подобного прибора.
12. Храните устройство вдали от прямых солнечных лучей, в сухом и хорошо проветриваемом месте при температуре не ниже -7 и не выше +40 градусов по Цельсию.
13. Утилизация прибора и его электрических батареек должна осуществляться в соответствии с общепринятыми правилами.

Начало использования

1. Выньте щетку из упаковки.
2. Крышку отсека батарейки поверните против часовой стрелки и снимите ее.
3. Извлеките из отсека батарейку, снимите защитную пленку и вставьте обратно (положитель-

ным полюсом вниз).

4. Закройте крышку и поверните ее по часовой стрелке.

Выбор режима чистки

Выбор необходимого режима работы осуществляется последовательным нажатием кнопки включения.

Зубная щетка Revlyne RL 025 Baby может работать в четырех режимах:

START

Этот режим без вибрации, он рекомендован детям, которые еще не привыкли к вибрирующему режиму. Его рекомендуется использовать для знакомства ребенка с щеткой.

SOFT

Характеризуется низкой амплитудой колебания щетинок, невысокой частотой вибрации. Частота колебаний щетинок – 12 000 в минуту.

NORMAL

Рекомендована для регулярного использования. Частота колебаний щетинок – 16 000 в минуту.

INTENSIVE

Максимальная частота колебаний щетинок – 20 000 в минуту.

Любой последний выбранный режим сохраняется в памяти и при последующем использовании щетки включается в первую очередь.

Процесс чистки

Аккуратно наденьте насадку на посадочное место. Прежде чем приступить к чистке зубов, смочите водой чистящую головку зубной щетки с нанесенной на нее зубной пастой. Это поможет зубной пасте лучше воздействовать на поверхность зубов во время чистки.

Поднесите насадку щетки к поверхности зубов, расположив параллельно линии десен. Включите щетку. Производите чистку мягко. Не надавливайте слишком сильно, иначе можете травмировать поверхность зубов и десен. Перемещайте чистящую головку медленно, совершая вращательно-возвратные движения. Менять зоны чистки каждые 30 секунд согласно сигналам таймера.

После завершения чистки полость рта необходимо тщательно прополоскать чистой водой.

Гарантия

Гарантия на прибор — 2 года.

Гарантированное техническое обслуживание прибора осуществляется в течение действующего гарантийного срока бесплатно. Далее обслуживание щетки осуществляется за счет покупателя.

Гарантия не распространяется:

На расходные материалы и комплектующие;
На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие применения их не по назначению; неосторожного и/или небрежного использования (включая перегрузку), приведшего к повреждениям; модификации, вскрытия и/или ремонта неуполномоченной организацией (частным лицом); нарушением правил эксплуатации, и/или хранения, и/или транспортировки, указанных в руководстве по эксплуатации;
На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие подключения к неправильному источнику питания;
На товары, эксплуатировавшиеся с неустраненными недостатками;
На неисправности, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как действия третьих лиц, явления природы и стихий-

ные бедствия, домашние и дикие животные, насекомые, попадание внутрь товаров посторонних предметов и жидкостей;
На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, потери и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации и в результате естественного износа.

Комплектация

Основной блок щетки
Сменная насадка — 2 шт
Элемент питания тип AAA — 1 шт
Инструкция по эксплуатации
Гарантийный талон

Технические характеристики

Модель — RL 025 Baby
Частота колебаний — 12 000-20 000 в мин
Режимы работы — 4
Размер изделия — 160.5 x 35 x 35 мм
Номинальное напряжение — 1,5 В
Мощность — 0,51 Вт
Номинальная сила тока — 0,34 А
Уровень влагозащиты — IPX7 (Допускается промывание под проточной водой после использования.)
Материал корпуса — ABS + Silica gel
Материал насадки — PC + нейлон Dupont
Питание — батарейка AAA
Гарантия — 2 года

Произведено: по заказу ИП Барсовой Н. Э., г. Москва, Варшавское шоссе, д. 152/2

Изготовитель: Shenzhen Fortunecome Technology Co.,Ltd
No.57 Shangxia Road, Shangxiawei, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen City, China

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Название организации

Место продажи

Место для печати

По всем вопросам обращайтесь на горячую линию:

www.revlyne.ru
8 (800) 775-38-49